

## Gestion des champs personnalisés

MyLab vous donne la possibilité de créer des champs personnalisés pour les clients, les unités, les composants, les échantillons, et les dossiers d'entretien.

L'utilisation des champs personnalisés vous permet d'enregistrer toutes les informations personnalisées qui est spécifique à votre entreprise ou industrie.


Commencez par ouvrir la tâche Administration.



Si vous ne disposez pas de la tâche Administration, vous n'avez pas l'autorisation de gérer les champs personnalisés.

Pour chaque site myLab il y a un utilisateur principal qui a toujours cette autorisation, et ils peuvent l'attribuer à d'autres utilisateurs.

Maintenant, Ouvrez Gérer les champs personnalisés.

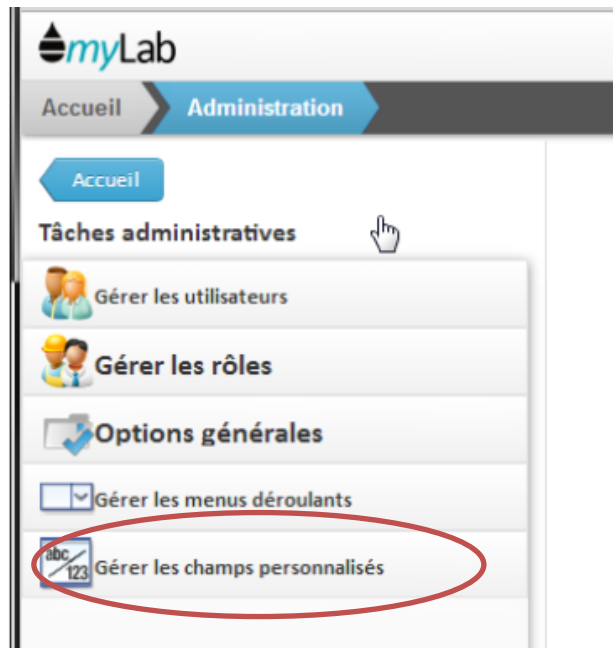

Sur la gauche, vous avez une liste des types d'enregistrements disponibles sur laquelle je peux créer des champs personnalisés.


Cliquez sur Unité.



Pour ajouter un premier champ personnalisé, cliquez sur Ajouter un champ personnalisé.



Entrez l'ID du GMAO dans le Nom du champ (ID du GMAO). Laissez le Type de champ en tant que Chaîne. Notez qu'il existe quelques types de champs que vous pouvez choisir: chaîne, nombre, date, liste, ou séparateur. Ensuite cliquez sur Ajouter.

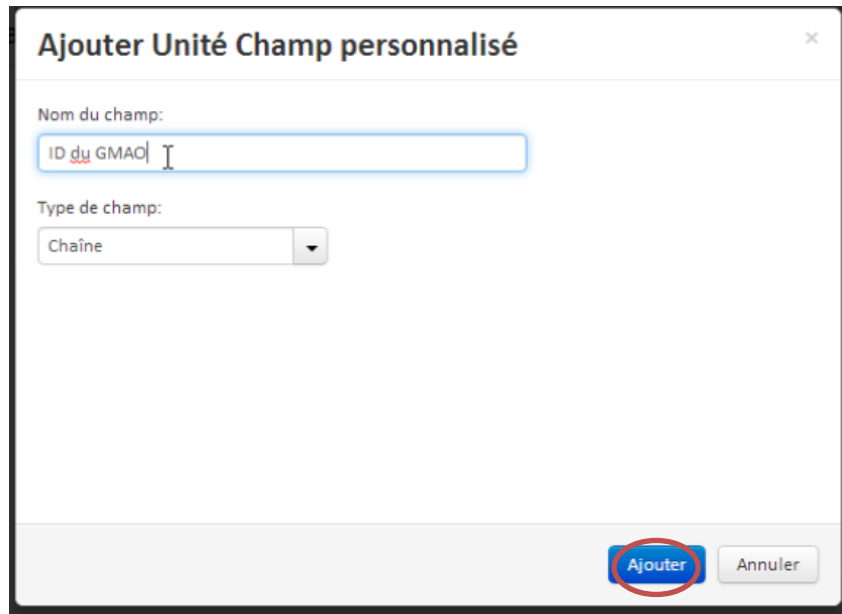

The image shows a dialog box titled "Ajouter Unité Champ personnalisé" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains two main sections:

- Nom du champ:** A text input field containing the text "ID du GMAO".
- Type de champ:** A dropdown menu currently set to "Chaîne".

At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Ajouter" (highlighted with a red circle) and "Annuler".

Le champ de chaîne personnalisée ID du GMAO apparaît maintenant dans la liste. Maintenant appuyez sur Sauvegarder pour enregistrer mes modifications.


Champs personnalisés de l'unité:

abc ID du GMAO Modifier

+ Ajouter un champ personnalisé    - Supprimer un champ personnalisé    ↑ Déplacer vers le haut    ↓ Déplacer vers le bas

**Sauvegarder**    Réinitialiser

En utilisant le menu Tâches, allez à Modifier les équipements.

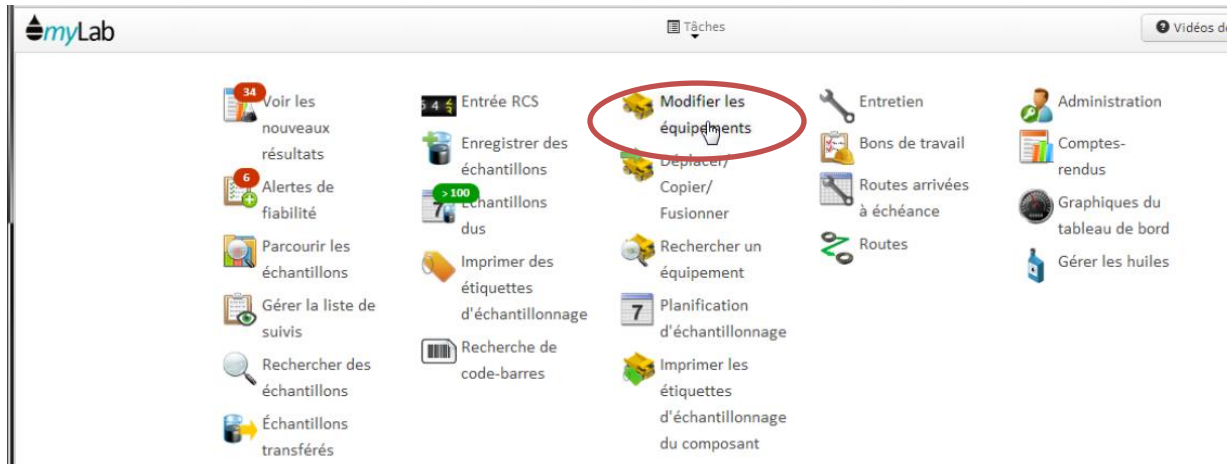

Sélectionnez une unité. Remarquez qu'il y a maintenant une nouvelle section Champs personnalisés avec des contrôles pour ID du GMAO et de la Condition.

Entrez l'ID du GMAO pour cet Unité. (ID\_ABC123)

Et cliquez sur Sauvegarder.

